

在宅ネブライザー療法の手引き



1. 吸入前の準備




- ・ 本体に水道水をいれる。
- ・ 水道水は作用槽内の水位線まで入れて下さい。
- ・ 水道水は約200ml入ります。
- ・ 水道水は毎回新しいものを入れ替えて下さい。

2.薬液を入れる



- カップホルダーと薬液カップを取り付け薬液カップに薬液を入れます。
- 生理食塩液20mlと各薬液剤

3.噴霧部を取り付ける

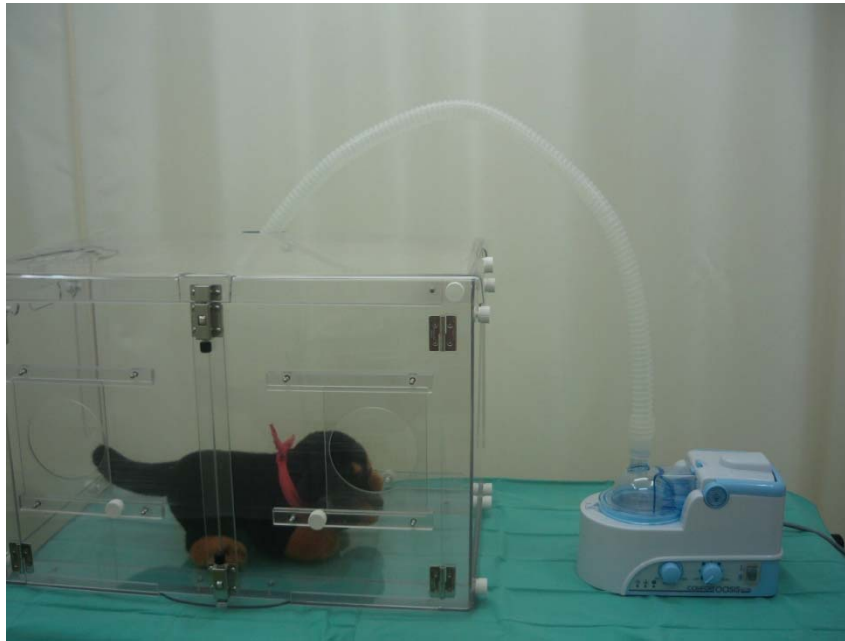

- 霧化室を取り付け耐熱送気ホースを接続します。


4.吸入開始



- 電源コードを接続して電源プラグをコンセントへ差し込みます。
- タイマーのつまみを回して吸入時間を設定します。(約15分)
- 霧化量の調節(Max)
- 電源スイッチをONにし噴霧を開始します。

注)直接噴霧する場合は霧化量を調節して下さい。

5.吸入中の様子

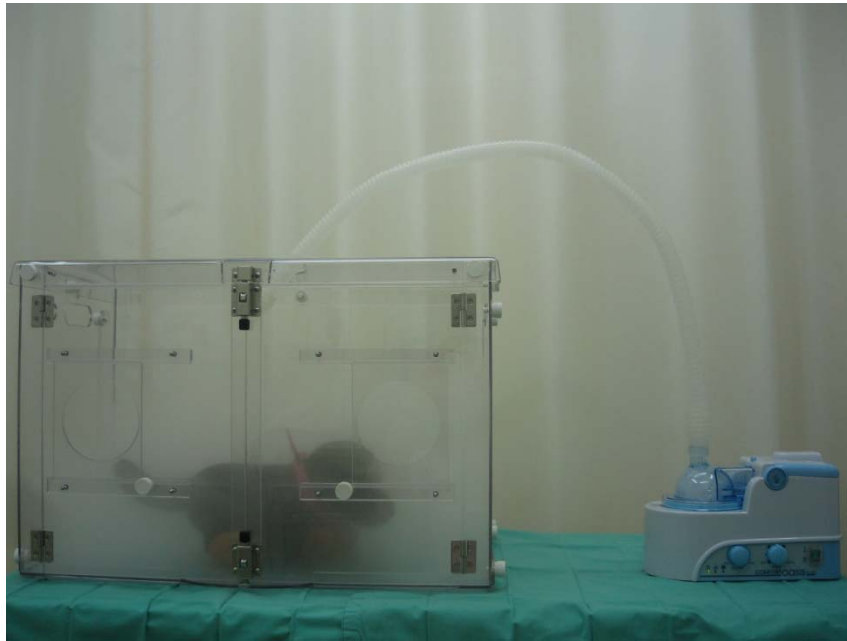

- ホースが折れ曲がらないように注意します。
- 必ず空気孔を数箇所作って下さい。

注)ホースが折れ曲がると薬液がたまり霧化量が低下することがあります。

お手入れ1



- 本体のスイッチをOFFにし電源コードを抜いて下さい。
- 耐熱送気ホース、霧化室、薬液カップ、カップホルダーは毎回使用後に水洗いします。

注) 薬液が付着したまま放置すると雑菌が繁殖してしまいますので注意して下さい。

お手入れ2



- 水道水を捨てます。

お手入れ3



- 作用槽内に残った水分はキッチンペーパー等で拭き取ります。

注) 振動子を損傷させないように注意して拭き取って下さい。

お手入れ4



- 各部品は別々に衛生的な所で自然乾燥させる。

注)各部品は定期的に洗浄、消毒を行って下さい。取扱説明書13から18ページを参照して下さい。